



**Signatera™**  
Residual disease test (MRD)

# Rano saznanje može da napravi razliku

Dobijte ranije i preciznije informacije nakon  
lečenja kancera





## Šta je molekularna rezidualna bolest (MRD)?


MRD je prisustvo malih tragova kancera u krvi, kao što su cirkulišuća tumorska DNK (ctDNK) ili mikroskopski delići tumorske DNK.

# Zašto je nadzor nad kancerom važan?

**Rano saznanje o tome da li u vašem telu ima tragova kancera može da pomogne lekaru ili onkologu da odluči:**

- da li reagujete na terapiju
- da li treba razmotriti dalje lečenje kancera
- da li postoje znaci da se kancer vratio ili napredovao

Najčešći alati za snimanje koji se koriste za otkrivanje prisustva kancera uključuju kompjuterizovanu tomografiju (CT), magnetnu rezonancu (MR), pozitronsku emisionu tomografiju (PET) i mamografiju. Ovi alati za snimanje su ograničeni u sposobnosti da otkriju molekularnu rezidualnu bolest (MRD), odnosno vrlo male tragove kancera u telu. Ako se ne leče, rezidualne ćelije kancera vrlo verovatno će se umnožiti i izazvati povratak bolesti.

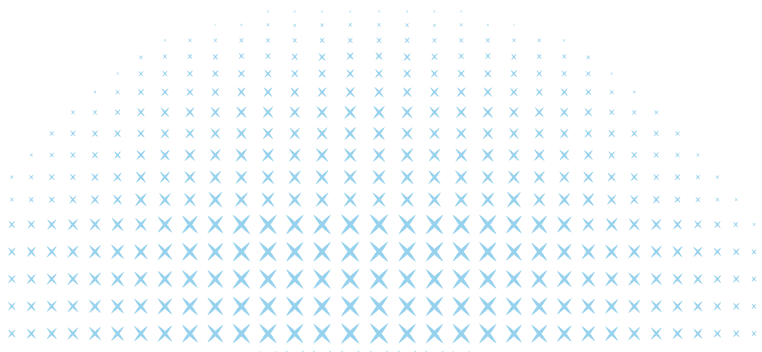

# Signatera™ je jedinstveno personalizovana za svakog pacijenta


Signatera™ je test izrađen po meri, zasnovan na jedinstvenom skupu tumorskih mutacija svakog pacijenta.

Ranije saznanje o tome da li je verovatno da će se vaš kancer vratiti ili je napredovao nakon lečenja može vam pomoći da vodite informisaniji razgovor sa lekarom o tome kako da nastavite lečenje ili da otkrijete promene u svojoj bolesti.

## Kako se Signatera™ test izvodi?

1

Jednokratna analiza krvi i tkiva određuje vaš jedinstveni skup tumorskih mutacija.

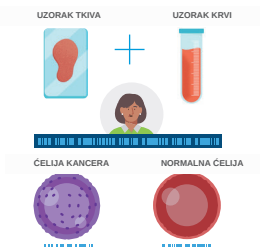


2

Signatera™ test se izrađuje po meri i personalizuje za vas.



3

Signatera™ otkriva porast ili pad ctDNK svaki put kada se naruči u sklopu vaših redovnih kontrolnih analiza krvi.

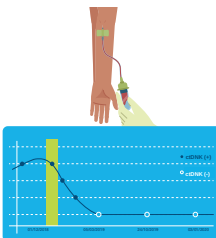

## Koliko vremena je potrebno da dobijem rezultate testa?

3–4

NEDELJE

### Izrada vašeg prvog Signatera™ testa

Kada se Signatera™ test naruči prvi put, potrebne su 3–4 nedelje za izradu vašeg personalizovanog testa.

1–2

NEDELJE

### Nakon što je vaš test izrađen

Potrebno je 1–2 nedelje da rezultati testa postanu dostupni vašem lekaru.

## Šta znače moji rezultati?

### ctDNK

Veći rizik od povratka vašeg kancera

### ctDNK

Veća verovatnoća da ostanete bez kancera

Signatera™ test se preporučuje za periodičnu upotrebu tokom vašeg lečenja, prema uputstvu lekara, radi otkrivanja prisustva bolesti.

## Koliko je Signatera™ pouzdana?

Signatera™ može da otkrije izuzetno male količine tumorske DNK pre nego što povratak kancera postane vidljiv tradicionalnim alatima za snimanje, kao što su CT ili MR. Signatera™ test je veoma osetljiv; to znači da, ako je rezultat testa pozitivan, postoji velika verovatnoća da bi se vaš kancer mogao vratiti bez daljeg lečenja.

Za više informacija o Signateri™ ili za pregled objavljenih studija, posetite

[www.natera.com/signatera](http://www.natera.com/signatera)

Pitajte svog lekara o Signateri već danas ili se obratite svom lokalnom Natera provajderu testa.



Natera je globalni lider u testiranju slobodne DNK (cell-free DNA), sa fokusom na zdravlje žena, onkologiju i zdravlje organa. Naša misija je da promenimo način lečenja bolesti širom sveta, koristeći jednostavno vađenje krvi za proaktivno usmeravanje terapije.



13011 McCallen Pass, Building A Suite 100 | Austin, TX 78753

[www.natera.com](http://www.natera.com) | 1.650.489.9050 | Fax 1.650.412.1962

Signatera je razvijena i njene karakteristike učinka utvrđene su od strane laboratorije sertifikovane po CLIA standardu koja izvodi test. Test nije odobren niti registrovan od strane Američke agencije za hranu i lekove (FDA). CAP akreditovano, ISO 13485 sertifikovano i CLIA sertifikovano. © 2023 Natera, Inc. Sva prava zadržana. SGN\_PT\_CRC\_SlimBro\_20231012\_NAT-8020070\_INTL



Vuka Karadžića 13/15  
24000 Subotica  
m: +381 63 388 546  
e-mail: [office@medhel.at](mailto:office@medhel.at)  
[www.medhel.rs](http://www.medhel.rs)



Vojvode Milenka 7, 11000 Beograd  
t: +381 11 670 64 97  
m: +381 66 670 64 97  
e-mail: [adealab.bg@gmail.com](mailto:adealab.bg@gmail.com)  
[www.adealab.com](http://www.adealab.com)